

Інформація для замовлення

Срібло / Антимікробний



Проксимел Аг

Номер замовлення	Назва продукту	Розмір	Шт./Пачки/ Пакуєтний футляр
15100000	Проксимел/Сильніотоподарний препарат	3 дошки x 3 дошки	10 6
15200000	Проксимел/Сильніотоподарний препарат	4 дошки x 4 дошки	10 6
15300000	Проксимел/Сильніотоподарний препарат	6 дошки x 6 дошки	5 10
15400000	Проксимел/Сильніотоподарний препарат	4 дошки x 12 дошки	5 6
15500000	Проксимел/Сильніотоподарний препарат	Крижі	5 10



КолАктив Плюс Аг

Номер замовлення	Назва продукту	Розмір	Шт./Пачки/ Пакуєтний футляр
10330000	КолАктивПлюс Аг	2 дошки x 2 дошки	10 10
10340000	КоактивПлюс Аг	4 дошки x 4 дошки	10 10



Сорбалгон Аг

Номер замовлення	Назва продукту	Розмір	Шт./Пачки/ Пакуєтний футляр
999609	Сорбалгон/Сильніотоподарний препарат	1 дошка x 12 дошки	5 1
999610	Сорбалгон/Сильніотоподарний препарат	6 дошки x 6 дошки	5 1
999611	Сорбалгон/Сильніотоподарний препарат	4 дошки x 4 дошки	10 1
999612	Сорбалгон/Сильніотоподарний препарат	2 дошки x 2 дошки	10 1

Пінопластові пов'язки



Проксимель

Номер замовлення	Назва продукту	Розмір	Шт./Пачки/ Пакуєтний футляр
14100000	Проксимель	3 дошки x 3 дошки	10 6
14200000	Проксимель	4 дошки x 4 дошки	10 6
14300000	Проксимель	5 дошки x 5 дошки	10 6
14400000	Проксимель	6 дошки x 6 дошки	5 10
14500000	Проксимель	4 дошки x 12 дошки	5 6
14600000	Проксимель	Крижова кістка	5 10
14700000	Проксимель	Lg. Sacrum	5 10
14800000	Проксимель	Кабух	5 6



PermaFoam

Номер замовлення	Назва продукту	Розмір	Шт./Пачки/ Пакуєтний футляр
409427	PermaFoam	2,5 дошки x 2,5 дошки	10 1
409401	PermaFoam	4 дошки x 4 дошки	10 1
409402	PermaFoam	4 дошки x 6 дошки	10 1
409405	PermaFoam	6 дошки x 6 дошки	5 1
409406	PermaFoam	8 дошки x 8 дошки	3 1
409425	PermaFoam	Порістковий 4 дошки x 4 дошки	3 1
409426	PermaFoam	Транспарентний 3,2 дошки x 3,2 дошки	10 1



PermaFoam Comfort

Номер замовлення	Назва продукту	Розмір	Шт./Пачки/ Пакуєтний футляр
409408	PermaFoamКомфорт 11,3 см x 11,3 см		10 1
409412	PermaFoamКомфорт 6" x 6"		5 1
409413	PermaFoamКомфорт 8" x 8"		3 1
409422	PermaFoamКомфортний сакральний 7" x 7"		3 1
409424	PermaFoamКомфорт 6,5 дюйма x 7 дюйма увігнутий		3 1

Колагени



КолАктив Плюс

Номер замовлення	Назва продукту	Розмір	Шт./Пачки/ Пакуєтний футляр
10160000	КолАктивПлюс	2 дошки x 2 дошки	10 10
10180000	КоактивПлюс	4 дошки x 4 дошки	10 10

Альгинати



Сорбалгон

Номер замовлення	Назва продукту	Розмір	Шт./Пачки/ Пакуєтний футляр
49200000	Сорбалгон	2 дошки x 2 дошки	10 1
49210000	Сорбалгон	4 дошки x 4 дошки	10 1
49230000	Сорбалгон	4 дошки x 8 дошки	5 1

Гідроколоїди



Флексікол

Номер замовлення	Назва продукту	Розмір	Шт./Пачки/ Пакуєтний футляр
48600000	ФлексіКол	2 дошки x 2 дошки	20 1
48610000	ФлексіКол	4 дошки x 4 дошки	10 1
48620000	ФлексіКол	Крижовий скід 6 дошки x 7 дошки	5 1
48630000	ФлексіКол	Увігнута форма 3,5 дюйма x 4,75 дюйма 10 1	
48640000	ФлексіКол	Тонкий 4 дошки x 4 дошки	10 1
48660000	ФлексіКол	6 дошки x 6 дошки	5 1

Плівкові пов'язки



Гідроплівка

Номер замовлення	Назва продукту	Розмір	Шт./Пачки/ Пакуєтний футляр
685755	Гідроплівка	2,4 дошки x 2,75 дошки	10 1
685756	Гідроплівка	2,4 дошки x 2,75 дошки	100 1
685757	Гідроплівка	4 дошки x 5 дошки	10 1
685758	Гідроплівка	4 дошки x 5 дошки	100 1
685759	Гідроплівка	4 дошки x 6 дошки	10 1
685760	Гідроплівка	4 дошки x 6 дошки	50 1
685761	Гідроплівка	6 дошки x 8 дошки	10 1
685762	Гідроплівка	6 дошки x 8 дошки	50 1
685765	Гідроплівка	8 дошки x 12 дошки	10 1

Гідрофільм Плюс

Номер замовлення	Назва продукту	Розмір	Шт./Пачки/ Пакуєтний футляр
685770	ГідроплівкаПлюс	2 дошки x 2,8 дошки	5 1
685771	ГідроплівкаПлюс	2 дошки x 2,8 дошки	50 1
685772	ГідроплівкаПлюс	3,5 дошки x 4 дошки	5 1
685773	ГідроплівкаПлюс	3,5 дошки x 4 дошки	50 1
685774	ГідроплівкаПлюс	3,5 дошки x 6 дошки	5 1
685775	ГідроплівкаПлюс	3,5 дошки x 6 дошки	25 1

Щоб дізнатися більше про нашу продукцію або зробити замовлення, зв'яжіться з нами
HARTMANN за номером 1-800-243-2294 або відвідайте hartmannusa.com

Вже понад 200 років компанія HARTMANN надає ефективні та науково перевірені рішення медичним спільнотам по всьому світу. Рекомендації HARTMANN щодо профілактики та лікування були розроблені за допомогою... співпраця з багатопрофільними експертами з лікування ран та приклад постійного прагнення HARTMANN надавати економічно ефективні рішення для покращення лікування та догляду.

HARTMANN USA, Inc.

Рок-Гілл, Південна Кароліна
29730 1-800-243-2294hartmannusa.com

XLIT 2759 Вип. 3 (0618)

Going further
for healthРана
Управління

HARTMANN

Рекомендації щодо профілактики та лікування



Пролежні

6 кроків для запобігання травмам від тиску

1

Проявіть ініціативу
Першим кроком до впливу на профілактику травм від тиску в цілому закладу є співпраця з ключовим персоналом: **дотримуватися профілактичної програми.**

2

Визначення факторів ризику та втручань
Оцінити та виявити осіб, які перебувають у групі ризику, за допомогою валідованого інструменту оцінки, такого як шкала оцінки ризику Брейдена. **Впроваджуйте спеціальні профілактичні заходи на основі оцінки.**

3

Очищення та зволоження
Використовуйте м'які засоби зі збалансованим pH **зволожувати шкіру** та захисні засоби для пом'якшення впливу пошкоджень шкіри, пов'язаних з вологою (MASD).

4

Підтримуйте харчування
Заохочувати **достатню кількість рідини** та **збалансоване харчування**. Розглянемо **харчові добавки** за потреби, щоб забезпечити цілісність шкіри.

5

Повернути та змінити положення
Регулярно повертати та змінювати положення **нерухомих** або осіб, що перебувають у групі ризику.

6

Нанесіть профілактичну піну
Місцепінопластові пов'язки на **крижі, п'яти та під медичними пристроями** щоб запобігти терттю та травмам.

Оцінка, лікування та принципи підготовки ранового ложа (TIME)

Контрольний список оцінки та документації рани

1

Тип
Тиск, артеріальний, венозний, діабетичний, інший

4

Розмір
Довжина, ширина та глибина в см

7

Ранове ложе
Тип тканини (епітеліальна, грануляційна, слупаста, струп)

2

Розташування
Анатомічна локалізація та напрямкові терміни (правий, лівий, медіальний, дистальний)

5

Екссудат
Тип, колір, запах, кількість (мінімальний, помірний, сильний)

8

Тунелювання та підживлення гірничих робіт
Використання методу годинника

3

Сцена
Класифікуйте тяжкість рани залежно від її типу

6

Біль
Локалізація, тяжкість, частота, лікування, ефективність лікування

9

Періоранова
Краї рани та навколишні тканини

Лікуйте те, що бачите, та ЧАС

Ретельно виміряйте та задокументуйте характеристики рани та навколишніх тканин. Виберіть пов'язку на основі оцінки рани.

Інші типи ран

Види хронічних та гострих ран та їх лікування

Що ви бачите

Як це виглядає

Що робити

Що використовувати

Діабетик
Виразка стопи

Ускладнення цукрового діабету та периферичної нейропатії. Часто виникають на ділянках стопи, що піддаються повторюваному тиску/тертю, таких як підшовна частина та головки плюсневих кісток стопи. Можуть виникати великі мозолісті ділянки.



Викликано периферичними хвороба США. Більшість мочі відбувається проксимально едіальний кісточки, вище щиколотку або на теля.



- Контроль діабетичного стану
- Документувати стан перфузії
- Запобігання травмам
- Очищення рани проводити лише за призначенням лікаря
- Заповніть глибину рани
- Підтримуйте вологе ложе рани
- Розвантаження підшовної поверхні стопи

- Помірний/сильний дренаж
Пінопластова пов'язка
Альгінат
- Незагоєння/Інфекція
Срібло/Антимікробний

- Підтвердіть діагноз у лікаря
- Документувати стан перфузії
- Отримати призначення на компресію
- Підніміть ноги якомога вище
- Підтримуйте вологе ложе рани

- Відсутність/малий дренаж
Гідроколоїд
Застосовуйте компресію згідно з інструкцією
- Помірний/сильний дренаж
Пінопластова пов'язка
Альгінат
Застосовуйте компресію згідно з інструкцією
- Незагоєння/Інфекція
Срібло/Антимікробний
Застосовуйте компресію згідно з інструкцією

- Підтвердіть діагноз у лікаря
- Документувати стан перфузії
- Очищення рани проводити лише за призначенням лікаря
- Залежить від ніг
- Підтримуйте вологе ложе рани
- Тримайте неінфіковану некротичну рану сухою
- Негайно зверніться до лікаря для сухої рани, якщо виявлено інфекцію
- Без оклюзійних пов'язок

- Відсутній/невеликий дренаж
Неоклюзивна пінопластова пов'язка
Альгінатний неоклюзивний

- Зупинити кровотечу
- Очищення та запобігання інфекції
- Вирівняйте шкірний клапоть
- Накрийте та захистіть
- Імуноглобулін проти правця (TIG) згідно з полісом

- Пінопластова пов'язка
- Альгінат

ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ЛІКУВАННЯ ТЕ, ЩО ВИ БАЧИТЕ, ТА ЧАСУ

- Визначити та усунути причину
- Очищення та захистити ділянку
- Нанесіть захисний крем, лосьйон

- Очищувальні лосьйони
- Захисні креми
- Труси для нетримання сечі

ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ЛІКУВАННЯ ТЕ, ЩО ВИ БАЧИТЕ, ТА ЧАСУ

Лікування пролежнів / виразок

Що ви бачите

Як це виглядає

Що робити

Що використовувати

Глибокі тканини
Травма (ТТ)


Знебарвлена, неущоджена шкіра через до пошкодження підлеглих м'яких тканин. Зазвичай фіолетового або бордового відтінку.



- Усунути тиск
- Захищайте неущоджену шкіру
- Пересадка після відкриття рани

Етап 1

Неущоджена шкіра з локалізованою ділянкою, що не піддається зблідненню еритема. Може з'явитися інакше в темряві пігментована шкіра.

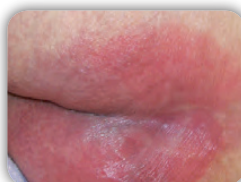

- Усунути тиск
- Захищайте неущоджену шкіру

Етап 2

Часткова втрата товщини шкіри дерма з неглибокою, відкритою ділянкою та червоно-рожевим рановим ложем. Слау/струп відсутній.



- Усунути тиск
- Регулярно очищайте шкіру
- Захищайте відкрити територію
- Керування дренажем

- Захисний крем
- Гідроколоїд
- Пінопластова пов'язка

Етап 3

Втрата тканини повної товщини, що включає пошкодження підшкірна тканина. Кістка, сухожилля або м'яз не видно. У рановому ложі може бути присутня струп/струп.



- Усунути тиск
- Очистити рану, якщо показано
- Керування дренажем
- Заповніть глибину рани

- Відсутність/малий дренаж
Гідроколоїд
- Помірний/Сильний злив
Пінопластова пов'язка/альгінат
- Незагоєння/Інфекція
Срібло/Антимікробний

Етап 4

Втрата тканини на повну товщину з оголенням кістки, сухожилля, м'язів. У рановому ложі може бути присутнім струп/струп.



- Усунути тиск
- Очистити рану, якщо показано
- Керування дренажем
- Захищайте відкрити територію
- Заповніть глибину рани

- Відсутність/малий дренаж

Неможливо провести інсталяцію

Поверхня рани вкрита струпом або струпом. Стадіювання рани неможливе, доки не буде видалено некротичну тканину.



- Усунути тиск
- Очищення струпів/відкладень (не очищайте неущоджені п'яти)
- Керування дренажем
- Заповніть глибину рани

Т

Тканина нежиттєздатна

Я

Запалення або інфекція

М

Дисбаланс вологи


Е

КрайРани

- Некротична тканина (наявність струпу або струпу)
- Больові симптоми
- Глибина



- Висока кількість бактерій
- Підвищений рівень екссудат/дренаж
- Затримка загоєння
- Запах

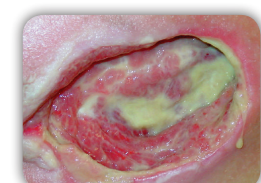

- Вінекссудат/дренаж з яєць
- Кожні захворювання
- Менша вологість та ризик змачерати ОН
- Доктор у рана ліжко



- Тривале запалення
- Хронічна рана
- Затримка зцілення
- Підживлення



Що робити

Що використовувати

- Видалити некротичні тканини
автолітична санація рани
- Очистіть рану
- Оцінка болю
Накладіть зручні пов'язки
- Визначте глибину:
Заповніть глибину рани

- Автолітична санація
Гідроколоїд
Пінопластова пов'язка
Альгінат

- Зменшення біонавантаження
- Обережно очистіть рану та ретельно
- Застосовуйте антимікробні засоби
- Обслуговуйте баланс вологи:
Абсорб сильний дренаж
Донат волога для висихання рани

- Помірний/Сильний дренаж
Гідроколоїд
Альгінат
- Незагоєння/Інфекція
Срібло/Антимікробний

- Ідентифікуйте тип екссудату
- Обслуговуйте баланс вологи
Абсорб сильний дренаж
Донат Е волога для висихання рани

- Ні/Малий Діагностика
Гідроколоїд
Пінопластова пов'язка
- Помірний/Сильний дренаж
Гідроколоїд
Альгінат
- Нецільовий НГ/Інфекція
Срібло/АНТИМікробний

- Визначте причину та доцільність лікувальне втручання
- Підтримуйте баланс вологи
- Поглинання важких дренажних систем
- Зволожуйте суху рану

- Ні/Малий Діагностика
Гідроколоїд
Пінопластова пов'язка
- Помірний/Сильний дренаж
Гідроколоїд
Альгінат
- Нецільовий нг/Інфекція
Колаген
Срібло/АНТИМікробний

Вологість
Пов'язаний
Пошкодження шкіри
(МАСД)

Розрив шкіри
Скільки класифікацій розривів (Є НАТИСНІТЬ)
• Тип 1-Без втрати шкіри
• Тип 2-Часткова втрата клаптя
• Тип 3-Повна втрата закриттів

Пошкодження шкіри шляхом тривалого впливу до вологи від нетримання, рана екссудат і піт.

